


AquaTop XS

Warmwater oorspuit

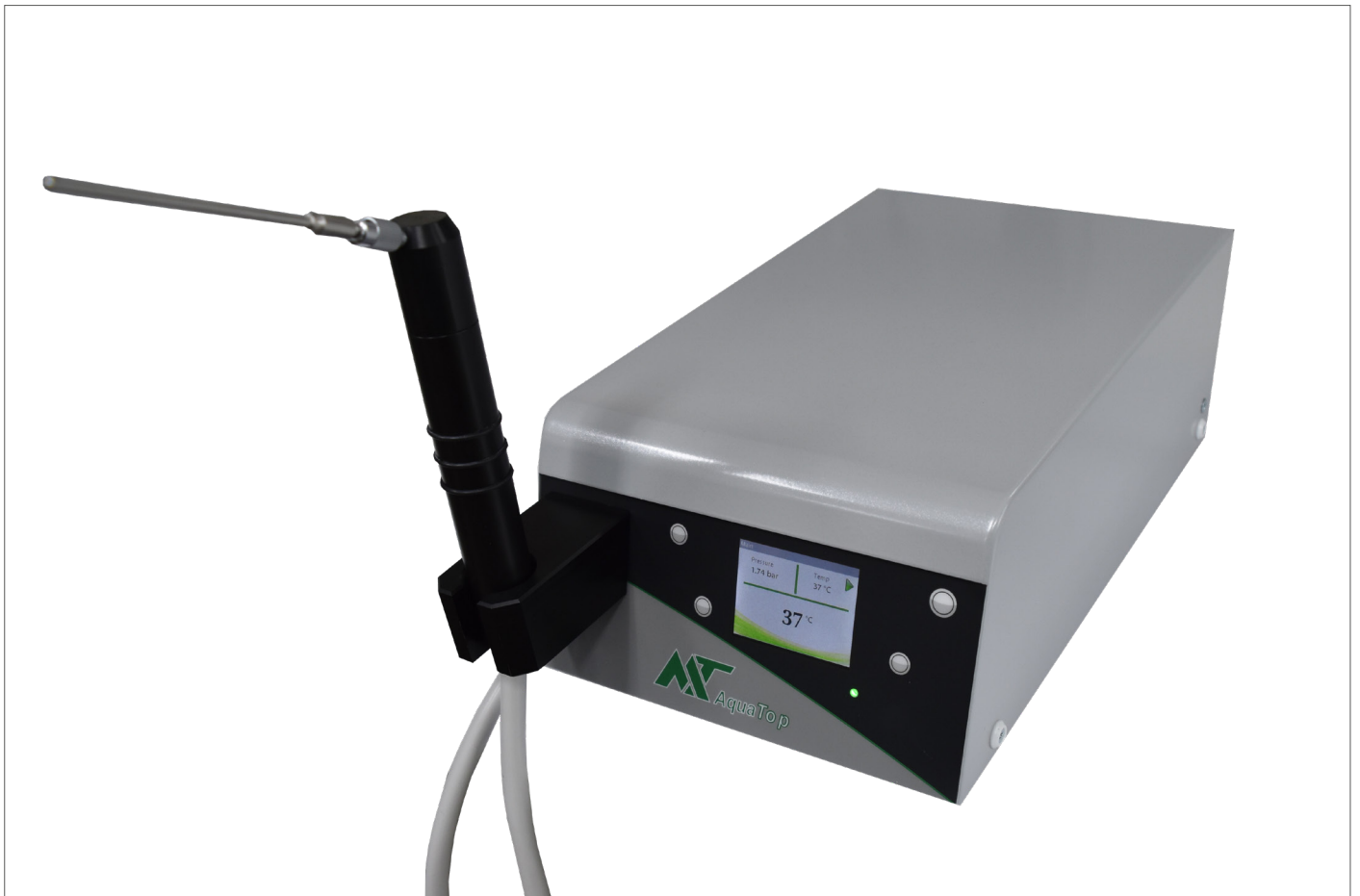


De AquaTop XS is een warmwater oorspuit. Leverbaar in twee varianten. Variant 1 wordt exclusief gebruikt voor het schoonmaken van de oorholte en levert een constante waterstroom met een temperatuur van 37°C. Variant 2 is zowel te gebruiken voor het schoonmaken van de oorholte als voor stimulatie tijdens calorisch onderzoek.

Deze variant levert een constante waterstroom met een instelbare temperatuur van 30°C, 37°C en 44°C. Deze is regelbaar met de drukknop op het handvat. De AquaTop XS is voorzien van een anti-legionella functie zodat deze altijd veilig gebruikt kan worden.



Kenmerken op een rij

- Anti-legionella functie
- Nauwkeurige temperatuurregeling
- Waterdruk instelbaar
- Temperatuurbeveiliging
- LCD display
- LED temperatuuraanduiding
- Integratie met MediTop KNO-behandelunits of stand alone
- Compact design

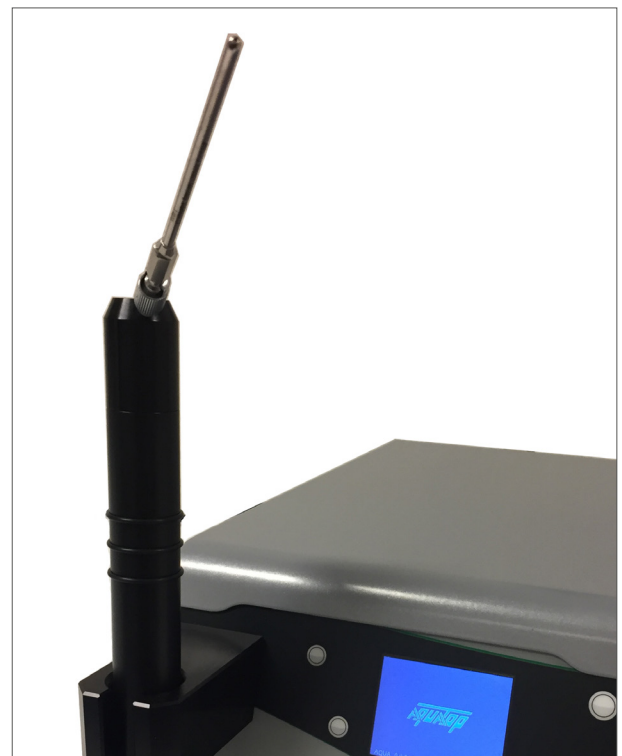

Technische gegevens

Aansluitspanning	230 VAC
Temperatuur instellingen	30°C - 37°C - 44°C
Ingaande waterdruk	2.0 - 6.0 bar
Max vermogen	1100 VA
Gewicht	3 kg