


AquaTop XS

Système d'irrigation électronique à eau chaude

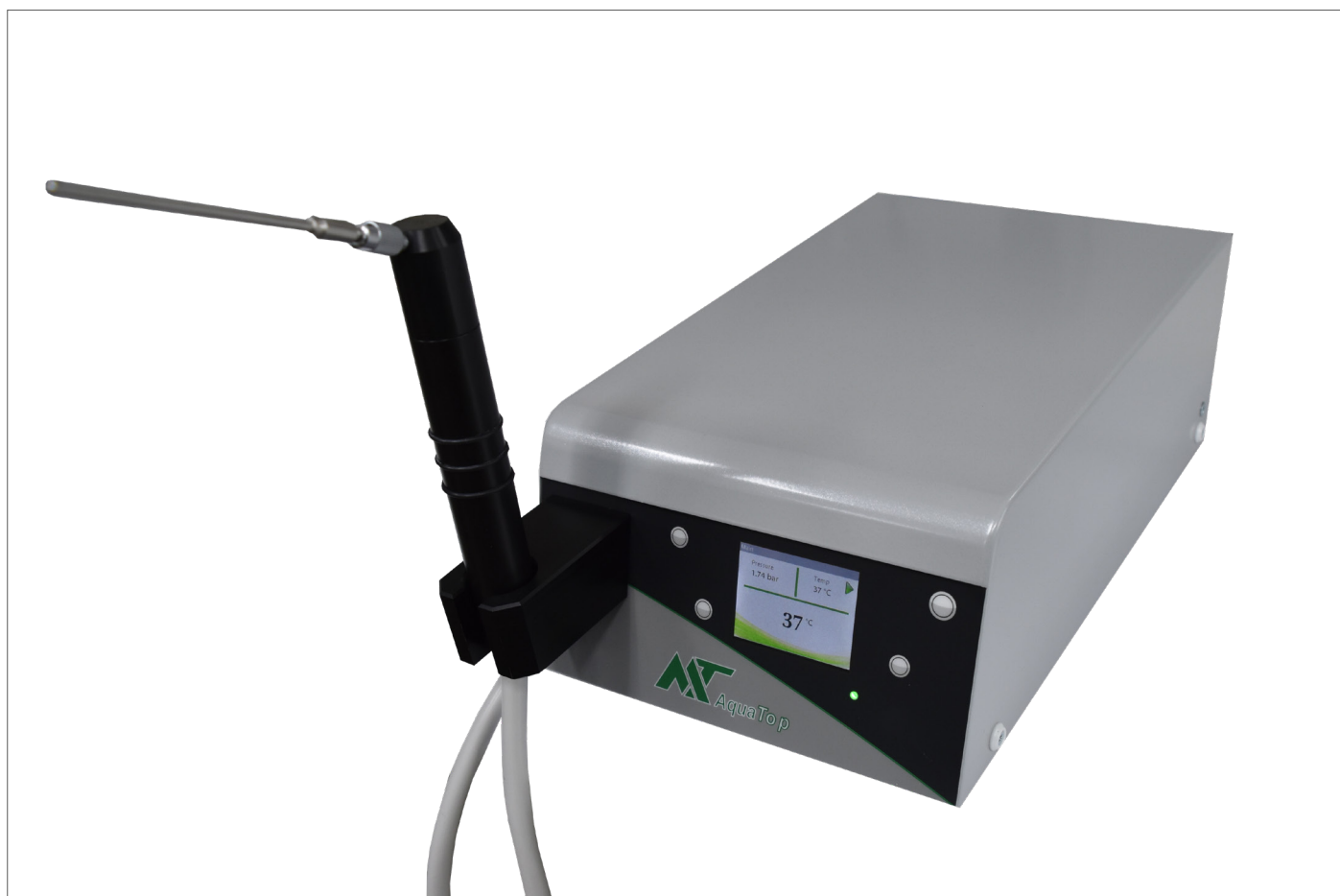

L'AquaTop XS est un système de seringue auriculaire disponible en deux versions. L'un convient à l'irrigation des oreilles avec son jet d'eau constant à 37 degrés. L'autre est une version à trois températures pour l'irrigation des oreilles et la simulation calorique. Il y a trois réglages de température (30°C, 37°C et 44°C).

Le contrôle électronique de la température est très précis. L'AquaTop XS intègre une conception à débit constant pour maintenir l'eau douce s'écoulant à travers l'irrigateur jusqu'à la pièce à main. Ceci empêche la croissance de biofilm et de microbes en évitant tout danger pour le médecin et le patient.



Les avantages

- Système de débit d'eau constant pour empêcher la croissance des microbes et biofilm
- Contrôle électronique précis de la température
- Régulation de la pression à partir du bouton sur la pièce à main
- Protection contre la surchauffe
- Affichage LCD
- La LED indique l'état de l'appareil
- Construction de haute qualité
- Intégration facile avec les unités de traitement ORL de MediTop
- Design compact



Spécifications techniques

Tension d'alimentation	230 Volt AC - 50/60 Hz
Réglage de température	30°C - 37°C - 44°C
Pression minimale de l'eau	2.0 bar
Pression maximale de l'eau	6.0 bar
Consommation d'énergie maximale	1100 VA
Pression de l'eau à régler	1.8 bar
Poids	3 kg